



DA/
NO

R1

Knæ
Pleje
apparat
Brugervejledning

KNÆ PLEJE FUNKTIONER

Vibrations Massage
Varme behandling
Elektrisk muskel stimulation



VIGTIGE EGENSKABER

- Justerbar temperaturområde 40°C-70°C (104°F-158°F)
- 2 enheder så begge knæ kan få behandling samtidig.
- Enhederne er designet til at passe på knæ, skuldre eller albuer.
- Justerbare stropper med klik funktion for nem af- og påmontering.
- EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) puder der også kan benyttes andre steder på kroppen.

BEMÆRKNINGER

- Som standard kører varme terapien i 30 min. Tænd på On/Off knappen hvis du ønsker at genstarte behandlingen.
- Når en behandling er i gang kan nogle knapper/funktioner være deaktiveret.

SÅDAN BRUGER DU ELEEEELS R1

- 1) Tryk på Power knappen for at tænde for R1. Som standard er R1 i Auto Mode hvilket betyder: 50 grader celcius, varierende vibrations styrke samt EMS styrke 1. Tryk endnu engang på power knappen for at slukke din R1.
- 2) Tryk på temperatur kontrol knappen for at starte varme terapi behandling. Justér temperaturen ved at trykke på temperatur kontrol knapperne. Varme terapien stopper hvis temperaturen kommer under 40 grader.
- 3) Tryk på EMS knappen for at starte behandling med elektriske impulser. Justér intensiteten ved at trykke på intensitets knapperne. Tryk på EMS knappen igen, hvis der ønskes en anden type elektroterapi.
- 4) Tryk på Vibrations knappen gentagne gange for at skifte imellem Lav, Høj eller varierende vibration. Auto Mode slukkes hvis der manuelt vælges vibrations type.
- 5) Tryk på Auto Mode knappen hvis du ønsker at slukke for Auto tilstand. Tryk igen for at genstarte enheden og derefter kan der justeres temperatur og EMS styrke.
- 6) Du kan også få EMS behandling andre steder på kroppen (arme, ben osv.). Forbind de eksterne EMS puder til den eksterne EMS udgang på R1. Og monter EMS puderne på kroppen.
- 7) EMS puderne bør igen monteres på det beskyttende papir efter brug.

ELEEEELS R1 OVERBLIK



- 1) R1 enheden
- 2) Ekstern enhed
- 3) Display kontrolpanel
- 4) Varme puder
- 5) Vibratorer



DA/
NO

SÅDAN BRUGER DU EMS PUDERNE

- Tilslut EMS puden/puderne til det medfølgende kabel og forbind derefter kablet til den eksterne elektrode indgang på R1.
- EMS puderne skal holdes rene for snavs, fedt og lignende. Hvis de føles snavsede, så skal de skylles i rent lunkent vand og lufttørres inden de bruges igen.
- EMS puderne kan i gennemsnit bruges op til 50 gange af 20min inden de begynder at miste deres fleksibilitet og lignende. Hvis ikke grundig rengøring kan afhjælpe problemet skal de udskiftes med nye.
- Benyt KUN ELEEEELS originale EMS pads til din R1 enhed.
- Du bør sikre dig at du bortskaffer de brugte EMS puder i henhold til regional affalds lovgivning. På lige fod med anden affaldshåndtering i øvrigt.


BEMÆRKNING: Hvis behovet er til stede, så anbefales det at benytte EMS massagen én til to gange om dagen. Har du følsom hud eller lignende så anbefales det at du fjerner EMS puderne fra huden så snart behandlingen er afsluttet. Hold pause med EMS behandling hvis du føler hudirritation og kontakt altid din læge hvis du er i tvivl.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE


- Opbevar altid R1 i rene tørre omgivelser.
- For at undgå beskadigelse af ledning eller R1, så bør ledningen ikke vikles omkring R1.
- Brug ikke ledningen som et "håndtag" når R1 transporteres.
- Beskyt altid R1 mod stærke opløsningsmidler og andre kemikalier. Der må heller ikke benyttes stærke kemikalier/opløsningsmidler til rengøring af R1.
- Fjern R1 fra strøm og lad den "køle" inden eventuel rengøring. Rengør KUN med vand (let fugtet klud) og aftør med ren og blød klud.
- Kom IKKE R1 ned i vand eller andre væsker.

DA/
NO


FORBEREDELSE

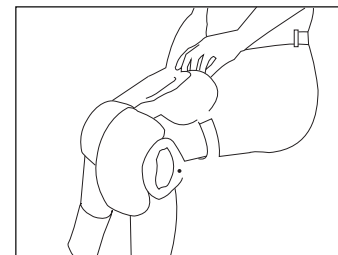

1) Benyt de elastiske stropper til at fastspænde ELEEEELS R1 enhederne til dit/dine knæ. Juster stropperne så R1 sidder fast og tæt, men ikke for stramt.

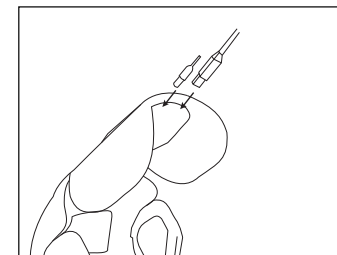

2) Forbind de to enheder med hinanden.

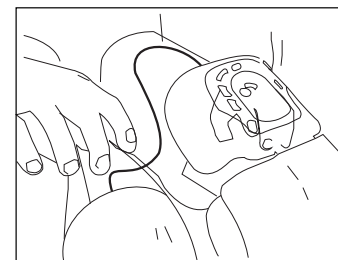

3) Tryk på kontrol knappen for at starte enheden.

DA/
NO

VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER

- 1) Benyt KUN den medfølgende strøm adapter.
- 2) Tab eller smid ikke R1 på hårde overflader og beskyt R1 mod skarpe genstande.
- 3) Benyt IKKE R1 mens du sover.
- 4) VIGTIGT: Benyt IKKE R1 sammen med andre elektro medicinske enheder såsom pacemakers og lignende. Er du i tvivl så kontakt ALTID din læge. Benyt ikke R1 tæt på en mikrobølgeovn da det kan genere effekten af R1.
- 5) Det anbefales at holde R1 enheden væk fra børn. Børn bør ikke benytte R1.
- 6) Når du benytter EMS funktionen så må du ikke bevæge dig.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEEELS massage og terapi apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTIEN DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTE PRODUKTET.

GARANTIEN DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;
- (e) Ved enhver garantisag skal der altid fremvises original gyldig købskvittering

