



X3

Slagmassage
apparat

Brugervejledning

TRÅDLØS OG GENOPLADELIG
14.8 V Lithium-ion Battery

LETVÆGTS DESIGN
2 lbs. / 0.9 kg

ELEEEELS slagmassage apparater er udviklet til hurtigt at afhjælpe muskel skader og lette smerter.

3) Ved opladning vil X3 LED langsomt blinke grønt. Når LED stopper med at blinke så er din ELEEEELS X3 fuldt opladet

4) Den grønne LED indikator viser også opladningsniveauet:

- Rød: 0-10%
- Grøn (level 1): 11-25%
- Grøn (level 2): 26-50%
- Grøn (level 3): 51-75%
- Grøn (level 4): 76-100%

SÅDAN BRUGER DU ELEEEELS X3

- Tænd for X3. Dette gøres ved at trykke og holde power knappen i ca. 2 sekunder. De grønne LED indikatorer vil nu indikere batteriniveauet jf ovenstående tabel.
- For at starte massage pistolen skal du nu trykke på power knappen (enkelt tryk). Gør dette gentagne gange for at indstille massage hastigheden. Antallet af blå LED lamper indikerer massage hastigheden (1-4).
- Hvis batteri niveauet kommer ned på 10% eller derunder vil LED skifte til Rød. Du kan fortsætte med at bruge din X3, men det anbefales at oplade snarest.
- Hvis din X3 ikke har været i drift i mere end 2 minutter, så vil den automatisk slukke ned. Den grønne LED vil blinke 2 gange før der auto slukkes.
- Vælg massage hastighed og massage hoved ud fra den type af massage der ønskes.
- En massage session varer 10 min og derefter stopper X3 automatisk. Tryk på power knappen igen for at starte forfra.


ØVRIGE ANVISNINGER

- Benyt en let fugtig klud eller lignende til rengøring af din X3. Aftør derefter med en tør og blød klud.
- Benyt IKKE stærke kemikalier til rengøring af din X3.
- Benyt KUN det inkluderede USB-C kabel til opladning af din X3.

ADVARSEL OG SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Smid ikke X3 ned i vand eller lign. Hold X3 væk fra væsker eller stærk varme.
- Benyt ikke X3 i meget støvede omgivelser.
- Forsøg ALDRIG at åbne/adskille X3.
- Tab eller smid ikke din X3 da den kan blive beskadiget.
- Vi anbefaler at X3 max benyttes i én time ad gangen. Hold derefter 10-15 mins pause inden X3 benyttes igen.
- X3 bør kun benyttes af voksne. Benyt ikke X3 hvis du har skader.

SPECIFIKATIONER

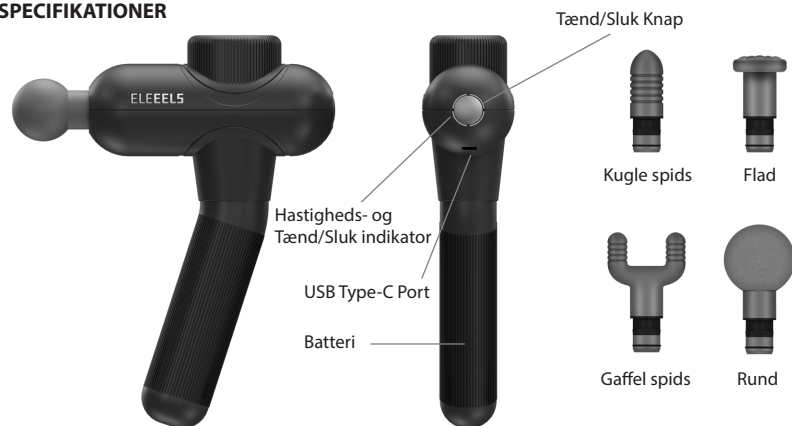

- 1) High-speed børsteløs motor (max 3200 rpm)
- 2) Robust. Endurance Motion Technology™
- 3) Genopladeligt lithium-ion batteri (op til 10 timers drift per opladning)
- 4) Støjsvag. Quiet Motion Technology™
- 5) 4 forskellige hastighedsindstillinger
- 6) Fuld trådløs og lav vægt (kun 0.9 kg)
- 7) Ét knaps funktion til Tænd/Sluk samt hastighedsregulering
- 8) LED indikator (On/Off/Hastighed)

- 9) Udskiftelige massagehoveder (4 forskellige massage hoveder)
- 10) USB Type-C kabel til opladning er inkluderet (Oplader medfølger ikke)
- 11) Smart opbevaringskuffert er inkluderet

Vibrations frekvenser:
Level 1 (1200 rpm), Level 2 (1800 rpm),
Level 3 (2400 rpm), Level 4 (3200 rpm)

INSTRUKTIONER

Venligst læs, inden ibrugtagning

OPPLADNING

Vi anbefaler at oplade batteriet til 100% første gang. For at oplade batteriet gøres følgende:

- 1) Forbind USB-C kablet til X3 og tilslut derefter kablet til én hvilken som helst kompatibel USB opladningskilde. (opladningskilde er ikke inkluderet.)
- 2) Opladningshastigheden afhænger af hvilken oplader der benyttes. Det anbefales at benytte en AC/DC adaptor der understøtter Type C (5V/3A, QC 3.0) eller med USB Power Delivery (9V/2A) for at oplade til 100% på ca. 3 timer.

- Er du i tvivl, så spørg altid din læge om gode råd i forbindelse med slag massage og brugen af massageapparater generelt.
- Benyt X3 på tørre og rene områder af kroppen. Benyt et let tryk og bevæg X3 hen over området i max 60 sekunder per område.
- Benyt KUN ELEEEELS slagmassage enheder på kroppens bløddel (muskler). Og tryk med en let kraft der føles behagelig. Benyt IKKE massagen i hovedet eller på hårde områder af kroppen (knogler eller lignende). Stop massagen øjeblikkeligt hvis der føles ubehagelig smerte.
- Bemærk: Ved brug eller opladning bør X3 altid være indenfor "opsyn".



ANSVARSFRAKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEEELS slagmassage apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTEN DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTET PRODUKTET.

GARANTIEEN DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;
- (e) Ved enhver garantisanøg skal der altid fremvises original gyldig købskvittering